

## Technische Daten

**Normalgröße**, ab Körpergröße 165 cm, gefaltet in der Tasche  
L x B x H in cm: 87 x 30 x 25  
Aufgebaut: 96 x 59 ½ x H variabel, je nach Einstellung

**Junior**, bis Körpergröße 165 cm, in der Tasche: 7 cm kürzer.  
Aufgebaut: 7 cm kürzer und 7 cm schmaler

**Shopper**, abgespeckte Version\*, aufgrund kleinerer Räder geringfügig kleinere Abmessungen. Eignet sich in der Juniorversion auch bestens für Kinder und kleinwüchsige Personen.

**Gewicht** 16 kg / ohne Batterie und ohne Sitz 11 kg.  
\* **Shopper** 12 kg / 8 kg

3 **Batterien** zur Wahl, Watt-Stunden (Wh), Gewicht, Reichweite auf der Ebene bei 100 kg Zuladung  
158 Wh\* 1,2 kg 13km    274,4 Wh\* 1,85 kg 25 km  
420 Wh\*\* 2,65 kg 35 km

\* Zulässig für Flugreisen    \*\* Verboten für Flureisen

**Ladegerät:** 100 – 240 V stufenlos, Ladezeit bei leerer Batterie  
5 / 8 / 12 Std.

**Max. empf. Zuladung:** 150 kg plus Gepäck,  
mehr Zuladung auf Anfrage

**Motor:** Nennleistung 24 V 200 Watt, in der Radnabe,  
vorwärts/rückwärts Betrieb

**Steigleistung** mit 100 kg Zuladung 15% Shopper 6%

**Geschwindigkeit:** 6km/h \* Shopper 4 km/h


\* In der EU ist auf öffentlichem Grund für nicht zulassungspflichtige Motorfahrzeuge die Höchstgeschwindigkeit auf 6 km/h begrenzt. Andere Höchstgeschwindigkeit auf Anfrage

**Bereifung:** vorne 200 x 50 mm, hinten 186 x 70 mm,  
alle mit Hartschaum-Füllung

**Bremsen:** Jedes Hinterrad mit je einer Bandbremse plus  
Parkbremse

**Lieferumfang wenn nicht anders vereinbart:**

1 TravelScoot komplett mit Batterie nach Wahl,  
Ladegerät, Scooter-Tragetasche, anklettbare Trapez-  
tasche für leichtes Handgepäck und Bordwerkzeug  
Serienmäßig ist bereits die Mitnahme von Geh-Stöcken  
und einem Einkaufskorb vorbereitet!

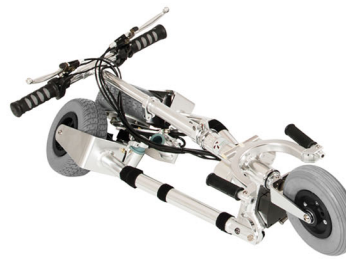

Der **TravelScoot** ist mit nur 16 kg weltweit mit Abstand das leichteste und kompakteste Elektromobil. Perfekt für Alle, deren Füße nicht mehr so richtig mitmachen, aber ansonsten noch in einigermaßen guter Verfassung sind.

Das innovative Klapp-System des TravelScoot erlaubt zum ersten Mal das Falten eines solchen Fahrzeuges in das Packmaß eines Zweirad-Scooters.

Der Auf- und Abbau dauert keine Minute! Der gefaltete **TravelScoot** passt komplett in seine Tragetasche und findet Platz, wo vorher noch nie ein Elektromobil transportiert werden konnte!

Das pfiffige Erscheinungsbild des **TravelScoot** nimmt einem weitgehend das für Manche als unangenehm empfundene Stigma der Behinderung. Falls man von Fremden überhaupt wahrgenommen wird, bekommt man oft ein zustimmendes Lächeln, ein „Daumen Hoch“ oder einen Kommentar wie „cooles Fahrzeug!“

Mehr Details finden Sie auf unsere umfangreichen Website

**[www.travelscoot.de](http://www.travelscoot.de)**

oder Sie besuchen uns:

[escooter.de](http://escooter.de) / TravelScoot sales Europe

Adi-Maislinger-Str. 7 81373 München

Öffnungszeiten Mo. - Fr. 10 - 18:30 Uhr



# TravelScoot

**Bringt Bewegung in Ihr Leben!**



**Onlineshop: [www.travelscootshop.de](http://www.travelscootshop.de)**

**[www.escooter.de](http://www.escooter.de)**

**Tel.: +49-(0)89-57951906**

**E-Mail: [mail@travelscoot.eu](mailto:mail@travelscoot.eu)**





## Produktbeschreibung

Aus einer revolutionären Idee wurde durch Verwendung von hochfestem Flugzeugbau-Aluminium bei sehr geringem Gewicht eine extrem robuste, patentierte Struktur. Trotz einer empfohlenen max. Zuladung von 150 kg fahren nicht wenige höhergewichtige Personen mit dem **TravelScoot** und nehmen als einzigen Nachteil eine geringere Steigleistung sowie eine reduzierte Reichweite gerne in Kauf. Letzteres kann aber durch die Minahme einer zweiten aufgestapelten Batterie mehr als ausgeglichen werden.

Aufgrund des unschlagbar geringen Gewichtes und Packmaßes ist der **TravelScoot** geradezu prädestiniert, überall mit hin genommen zu werden. Ob zum Supermarkt um die Ecke, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu Besorgungen in die Stadt, zu allen möglichen Veranstaltungen oder auf eine Reise um die halbe oder ganze Welt mit dem Flugzeug oder Kreuzfahrtschiff. Der **TravelScoot** macht wieder mobil, auch wenn die Füße Nein sagen und Einkaufen macht wieder Freude! Wenn Gehen schon beschwerlich ist, dann ist in der Regel auch Stehen nicht angenehmer. Aber Anstehen ist leider eine tägliche Notwendigkeit, sei es an einer Kasse, an einem Schalter, etc.. Mit dem **TravelScoot** steht man nicht mehr an, man **SITZT** an. In öffentlichen Verkehrsmitteln hat man immer seinen eigenen Sitzplatz dabei und muss nicht mehr Jüngere und/oder Gesündere darum bitten aufzustehen. Einfach dort wo Platz ist, quer zur Fahrtrichtung mit angezogener Feststell-Bremse parken und sitzen bleiben.

Behinderten-Fahrzeuge (mit mehr als zwei Rädern) dürfen überall dort verwendet werden wo man sich sonst zu Fuß bewegen würde, also auch innerhalb von Gebäuden!

Mit der erheblichen Gewichtseinsparung gegenüber von Konkurrenzprodukten geht praktischerweise eine erhöhte Reichweite einher.

Im täglichen Gebrauch muss ein Scooter immer wieder gehoben werden, sei es nur über einen Randstein oder in ein Fahrzeug, im schlimmsten Fall aber beim Fehlen eines Aufzuges sogar über eine Treppe! Dabei kann jedes Kilo entscheidend sein!



## Für Ihren TravelScoot haben wir ein umfangreiches Angebot an nützlichem Zubehör vorrätig

Der Universal-Anhänger kann so.....oder so verwendet werden



Für leichtes Handgepäck



Kreuzfahrt-Set



Fußplatte



Faltbarer Einkaufskorb



Flugreise-Set



Höhergelegte Akkuhalterung



Sitzfederung



Drei verschiedene Lithium-Ionen-Batterien zur Auswahl